

このたびは、ステンレス薬品庫をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は主材料にステンレス（SUS304）を使用し、使用目的に合わせてお使い頂ける薬品保管庫です。地震による震動や錆にも強く、研究室・工場などで末長くご使用いただけます。

棚板1コ当たりの耐荷重は、TK-1H 均等 30kgです。

※ 均等の耐荷重」とは、棚板の中に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量をいいます。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や、ほかの人への危害や財産への 損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

警告

誤った使いかたをすると 死亡または重傷などを負う可能性が想定される」説明しています。

■足をかけたり、よじのぼったりしない

転倒したり、足を滑らせて、けがをするそれがあります。

■設置・積み重ねのときは、固定金具を必ず取りつける。また、積み重ねは2台まで

薬品庫が転倒・落下してけがをするおそれがあります。

■不安定な場所に設置しない

薬品庫が倒れたり、引出しが落下して、けがをするおそれがあります。

注意

誤った使い方をすると 傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■耐荷重以上の荷物を収納しない

薬品庫が傾いたり、棚板が壊れたりして危険です。

■扉の開け閉めは、ゆっくり静かに行う

一気に開け閉めすると、衝撃により、収納物や扉が破損する恐れがあります。

■本体の切断面や突起に触れない

切断面などで、指をけがする恐れがあります。

■必ず鍵をかける

棚板を変更できる構造上ロック装置がついていません。

また、使用後は必ず、カギをかけてください。震動により収納物が出てくる場合があります。

■薬品庫内に物を入れたまま移動しない

収納物が割れたり、薬品がもれたりして危険です。

■子供の手の触れる場所に設置しない。また、子供を近づけない

薬品庫に触れて倒れたりして、けがをするおそれがあります。また、連結部・内部の切断面 および収納物によって指をけがするおそれもあります。

■薬品が付着した容器、液だれをした容器を収納しない

薬品の中には、ステンレスそのものを腐食させる性質のものがあります。特に酸類、その系統の薬品）長くお使い頂くためにも、使用後の容器はからぶきをし、液だれのないことを確認の上、容器のフタをしっかりと締めて収納してください。庫内で液だれが見つかった場合は、すみやかにふき取って下さい。液だれから発生するガスにより、保管庫が腐食したり、部品の欠落など倒壊する恐れがあります。

■屋外・水のかかる場所、火気の近くには設置しない

やけど、火災の原因になります。屋内の換気の良い、涼しい場所に設置してください。

■本製品には換気設備がついていません。

1日 1回 10分程度、管理者の下で、引出しを1つ、半開きにして換気することをおすすめします。


■改造や無理な修理、分解はしない

薬品庫内部のロック機構などに施された微調整がそなわれ、事故の原因になります。万一異常が発生した場合は必ず販売店にご相談下さい。

■変形・破損したまま使用しない

転倒・落下により、けがをするおそれがあります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡し下さい。
※ この説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

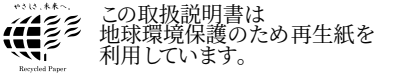

仕様

品 番		TK- 1H
均等荷重 引出し1個につき)		30kg
外形寸法		幅 900×奥行 500×高さ900
材 質	本体・引出し	SUS304
	取手・錠前	PP・真鍮
重 量		32kg
付属品	棚板	2枚
	固定金具	床用 4個
	連結金具	積載用 4個
	固定金具	壁用 2個
	トラスネジ (4mm)	20本
	コンクリート釘	6本

※ SW・SWTとの上下連結も可能です。

ステンレス扉

TK-1H

設置のしかた

壁への固定

●床用固定金具を使用。金具1枚につき2本のトラスネジでキャビネット上面後部をネジ止め、コンクリート釘やアンカーボルト等で壁面を固定します。

積み重ね

●積載用固定金具を使用。金具1枚につき4本のトラスネジで上下のキャビネット取付穴をまたぐようにネジ止めします。

床面への固定

●床用固定金具を使用。金具1枚につき2本のトラスネジでキャビネット側面下部をネジ止め、コンクリート釘やアンカーボルト等で床面を必ず4ヶ所固定します。

※コンクリート釘を付属品として用意しておりますが（アンカーボルトは付属していません）、床面・壁面への固定は床・壁の材質により、木ネジ、アンカーボルト等による適正な固定が必要となりますので、工務店・専門業者にご相談下さい。

コンクリート釘

床用固定金具

トラスネジ

使いかた

※製造時に金属のバリは極力取っておりますが安全のため手袋をしてから作業を行ってください。

- お使いの薬品瓶に合わせ、棚板の高さを調節してご使用ください。
- 本体内部のつめに棚板をのせてください。（必ず4箇所のつめにのせてください。）
- 仕切り板付きのコンテナ（別売）もご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。

お願い	●本製品には換気設備がついていません。1日 1回 10分程度、管理者の下で、引出しを1つ、半開きの状態にして換気することをおすすめします。 ●本製品は表面保護のため、ナイロンシートでカバーしています。ご使用前にはがしてお使い下さい。
-----	---

商品改良のため、予告なく仕様を変更する 場合がありますのでご了承下さい。
TK-1H2003-7/23

総発売元 トラスコ中山株式会社